

CoolSculpting Betriebsanleitung

CS 13082-G Abrufen und Hochladen des Verfahrensprotokolls

Publikum	Geschulte Allergan-Mitarbeiter, Händler oder Mitarbeiter von Händlern, die von Allergan zertifiziert wurden
Beschreibung	So rufen Sie Protokolldateien von einer CoolSculpting COM1-Steuer einheit ab und laden sie auf einen sicheren Protokollserver hoch.
Materialien	<ul style="list-style-type: none">• CoolSculpting COM1 Steuergerät• CoolSculpting Log Retrieval Stick• PC mit Internetverbindung
Referenz	<ul style="list-style-type: none">• Keine
geschätzte Dauer	<ul style="list-style-type: none">• 10 Minuten

***Bei diesem Verfahren besteht keine Stromschlaggefahr ***

CoolSculpting Produkt Support

www.coolsculpting.com


Copyright 2020 by ZELTIQ Aesthetics, Inc. All rights reserved.

Abschnitt 1 – Abrufen von Protokolldateien


So rufen Sie Protokolldateien ab:

1. Öffnen Sie die Zugangsklappe auf der Rückseite der Steuereinheit.
2. Stecken Sie den CoolSculpting Log Retrieval Stick in den oberen USB-Anschluss.
3. Schalten Sie die Steuereinheit ein.


Der Bildschirm zum Abrufen des Protokolls wird angezeigt.

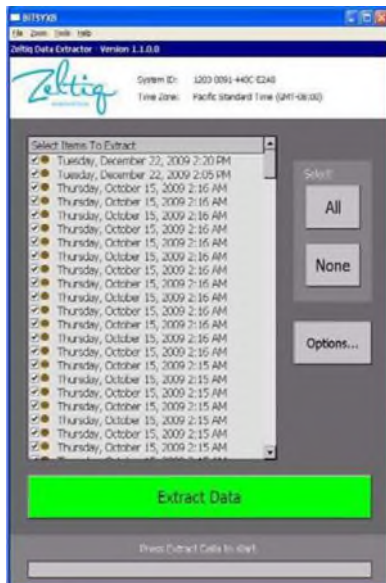

4. Klicken Sie auf „Alle“ und dann auf „Daten extrahieren“..
Der Downloadvorgang beginnt.

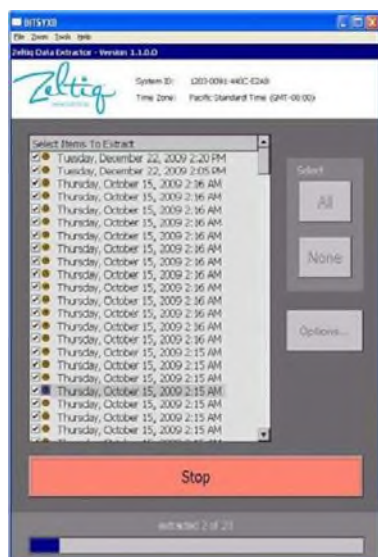

5. Wenn die Meldung „Verarbeitung abgeschlossen“ angezeigt wird, entfernen Sie den USB-Stick.

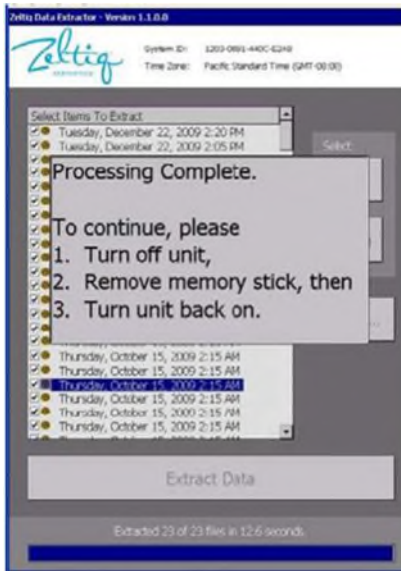


6. Schließen Sie die Zugangsklappe und schalten Sie das System aus.


Abschnitt 2- Hochladen von Protokolldateien

So laden sie ihre Protokolldateien hoch:


1. Schalten Sie einen Windows-Computer ein.
2. Bestätigen Sie, dass eine Internetverbindung hergestellt wurde.
3. Stecken Sie den Log Retrieval USB-Stick in den USB-Anschluss des Computers
4. Starten Sie den Windows Explorer und navigieren Sie zum Log Retrieval USB-Stick.
5. Suchen Sie die Datei „Allergan – Log File Uploader.exe“ und doppelklicken Sie darauf.

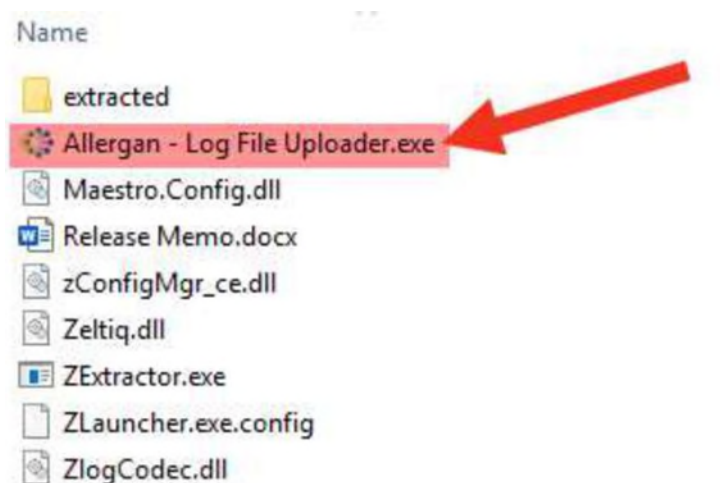


6. Sobald das Programm ausgeführt wird, wird der Bildschirm zum Hochladen des Protokolls angezeigt.

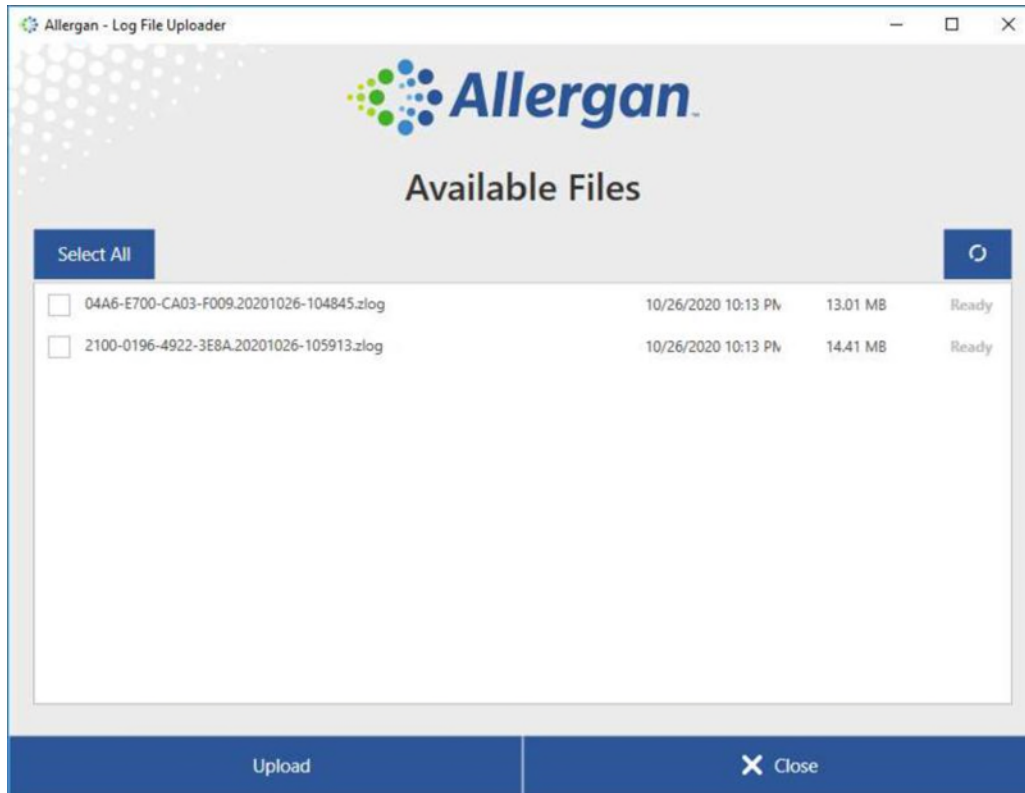


7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „ALLE AUSWÄHLEN“, um alle auf dem USB-Stick verfügbaren Protokolle auszuwählen oder sie einzeln auszuwählen. Neben den ausgewählten Dateien werden Häkchen gesetzt.

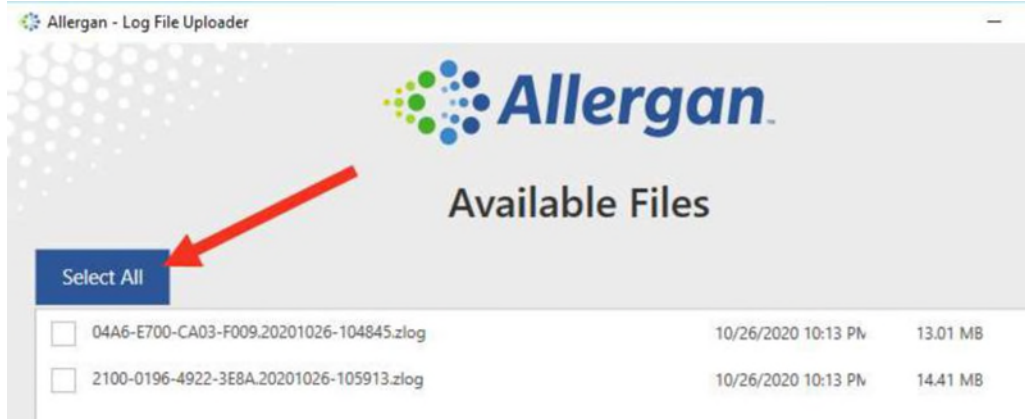


8. Nachdem Sie die Dateien ausgewählt haben, klicken Sie unten im Fenster auf die Schaltfläche HOCHLADEN, um die Dateien auf den Server hochzuladen

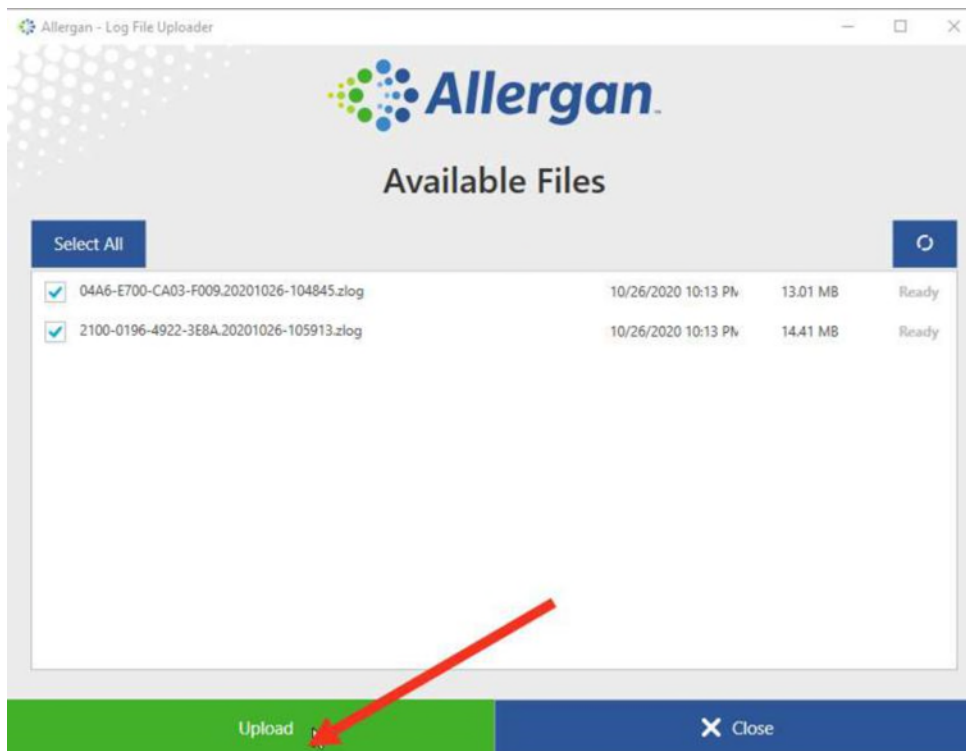

9. Sobald die Dateien hochgeladen sind, wird neben jeder Datei ERFOLGREICH angezeigt. In der Mitte des Fensters gibt es eine Option zum LÖSCHEN der Dateien, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

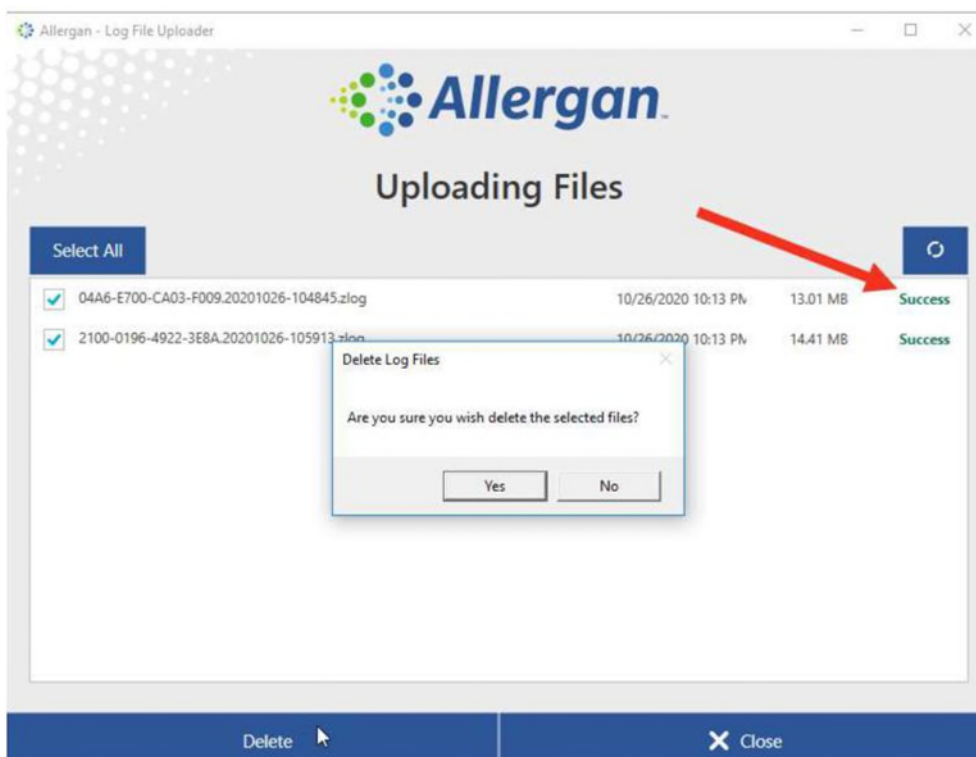

10. Nach dem Löschen können keine Dateien mehr angezeigt werden. Das Fenster kann geschlossen und der USB-Stick vom Computer entfernt werden.

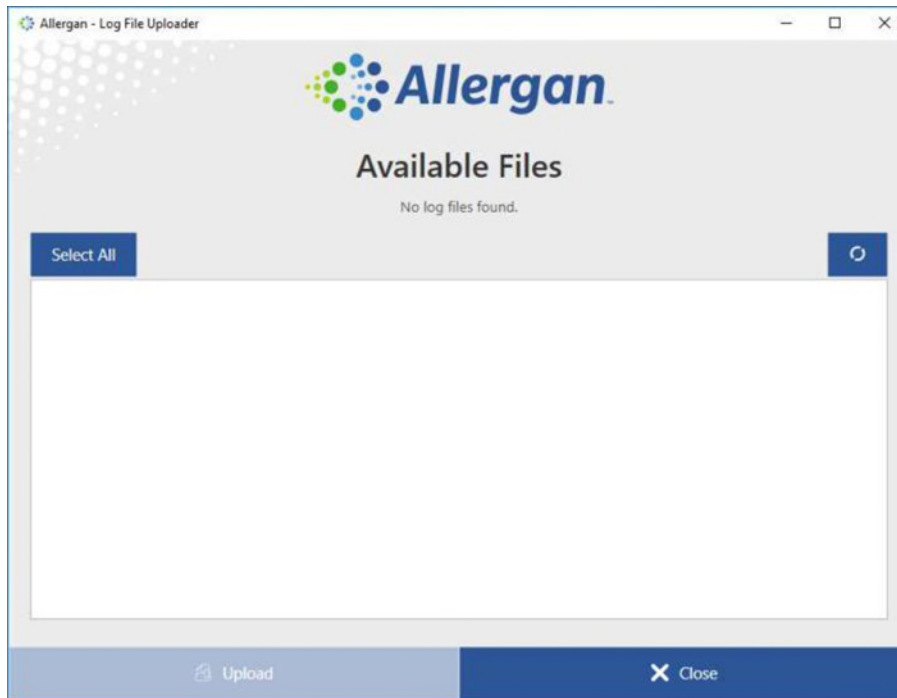

11. Bewahren Sie den USB-Stick zur späteren Verwendung auf.

This document and the contents hereof are considered proprietary and confidential information of ZELTIQ Aesthetics, Inc. Disclosure to unauthorized individuals or dissemination, publication or copying is prohibited without prior written consent of ZELTIQ.